

ENAMEL PLUS  
HRi FLOW<sup>HF</sup>

## PROVISIONALES EN 5 MINUTOS!

Temp Silic Mock up es un importante medio de comunicación entre dentista, paciente y laboratorio que permite de realizar provisionales directamente al sillón utilizando el composite fluido altamente relleno Enamel plus HRi Flow, material estético con características físicas ideales.

### VENTAJAS TECNOLÓGICAS Y OPERATIVAS

- Toma de impresión con silicona y cubetas transparentes 45 s.
- Endurecimiento de la toma de impresión 1 min. 30 s.
- Preparación de las carillas
- Aplicación del Flow HRi en la cubeta 30 s.
- Fotopolimerización 60 s.
- Fotopolimerización final con Ena Seal 60 s.

### ENAMEL PLUS HRi FLOW<sup>HF</sup>

- Altamente relleno
- Altamente fluorescente
- Altas viscosidad
- Altas elasticidad
- Altas radiopacidad
- Mejores propiedades físicas
- Sin burbujas



Caso inicial



Resultado final




### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	RELLENADO %	DUREZA VICKERS MPa	YOUNG MODULOUS MPa	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MPa	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MPa	RADIOPACIDAD
HRi Flow HF	77	770	13485	148	394	210% Al
Standard Flow	55	350	6000	120	350	30% Al

I ♥ ENAMEL FAMILY



Encerado

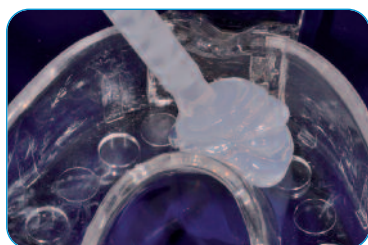

Silicona y cubetas transparentes



Impresión (endurecimiento 1 min. 30 seg)



Flow HRi\*



Fotopolimerización (60 seg)



Provisionales



Preparación sobre los provisionales



Preparaciones



Aplicación de Flow HRi\*



Cementación de los provisionales



Carillas



Resultado final

#### KIT MOCK UP - PARA CARILLAS PROVISIONALES

Código	Descripción	C.dad
TEMPSMU	<b>KIT MOCK UP</b> Temp Silic -Silicona Transparente para el dentista Puntas automezclantes Cubetas transparentes para anteriores Cubetas transparentes para inferiores Cubetas transparentes para superiores Enamel plus HRi Flow Puntas negras ø 1,2 mm Ena Seal	2x50 ml 8 Uds 2 Uds 2 Uds 2 Uds 3x2 g 3 2,5 ml
TS1	Silicona transparente para el dentista	50 ml
TS1-5	Silicona transparente para el dentista	5x50 ml
TSPA	Cubetas transparentes para anteriores	25 Uds
TSPL	Cubetas transparentes para inferiores	25 Uds
TSPS	Cubetas transparentes para superiores	25 Uds



Micerium S.p.A. Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy  
Tel. (+39) 0185 7887 880 • Fax (+39) 0185 7887 970 • hfo@micerium.it • www.micerium.com

CE 0123

Micerium S.p.A. en España  
C/. Verdi 38-40 bajos 2da. - 08172 Sant Cugat del Vallés, Barcelona  
Tel. 936743118 • michele@micerium.it • www.micerium.es

\*Para Enamel Plus HRi Flow ver las instrucciones del productor GDF incluidas en el Kit.

