


Open

!Adiós hábitos incorrectos!



BIS-GMA FREE
**BPA
FREE**
NO BISPHENOL A

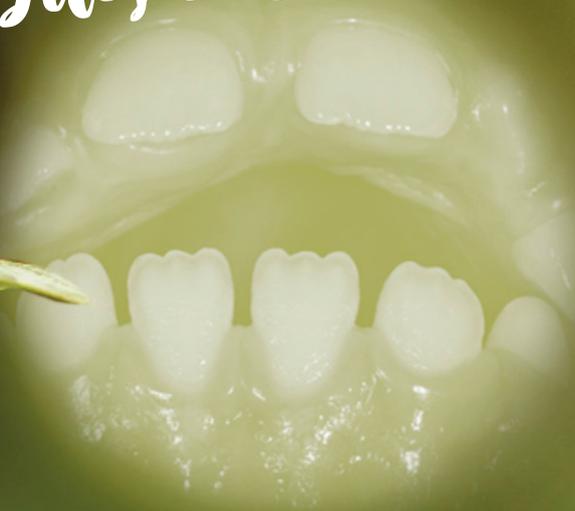

AMCOP[®]




ELASTODONTIC[®]
therapy

ortodonzia
M[®]
GRUPPO
MICERIUM

Open

Open es un nuevo dispositivo de elastodontico de la gama **Amcop Bio-Activators**, indicado para el tratamiento de arcos dentales con maloclusión esquelética de tipo de mordida abierta anterior (Open Bite); que tiene como causa determinante, hábitos defectuosos con respecto a la deglución atípica y una descompensación específica del carácter esquelético craneo-mandibolal. El dispositivo debe ser prescrito por el médico ortodoncista después de un diagnóstico correcto para la planificación correcta del tratamiento a realizar.



AMCOP®



Antes de iniciar el tratamiento con dispositivo abierto es necesario, a través de un análisis cefalométrico preciso en la proyección lateral de la telerradiografía del cráneo, entender el tipo de mordida abierta que debe ser específicamente esquelético.

La acción ortodoncia-ortopédica específica, adquirida por el dispositivo,

tiene lugar a través de la liberación de ciertas estructuras esqueléticas craneo-facial en movimiento de anteroflexión con la restauración, en equilibrio, del plano oclusal, lo que resulta en la resolución de la mordida abierta frontal (Mordida Abierta).

El plano oclusal del Bio-Activator **Open** se eleva de forma trasera y

tiene como fin una acción de empuje específica en los molares posteriores. El aumento oclusal funcionará como "tipo fulcro", para restaurar el plano oclusal horizontalmente.

Se observa que, el dispositivo en cuestión, sustituye a la aplicación de lazos de cables en dispositivos De primera clase Amcop Bio-Activators.

El dispositivo está diseñado con una guía oclusal adecuada para sostener los diferentes tipos de forma de arco. Para una educación funcional y actual de la lengua, así como en los Bio-Activadores **Amcop**, el botón en la zona plantar, en correspondencia del spot palatino (zona palatina retroincisiva superior).

OPEN 1

Dispositivo extra pequeño
Color **Azul**
Tamaño transversal de 45 mm*

OPEN 2

Dispositivo pequeño
Color **Azul**
Tamaño transversal de 50 mm*

OPEN 3

Dispositivo medio
Color **Azul**
Tamaño transversal de 55mm*

OPEN 4

Dispositivo grande
Color **Azul**
Tamaño transversal de 60 mm*

OPEN 5

Dispositivo extra grande
Color **Azul**
Tamaño transversal de 65mm*

* Medición tomada por la distancia transversal que separa las cúspides vestibulares de los seis superiores

Open



¡Adiós hábitos incorrectos!

AMCOP
Open

Contraindicaciones

El dispositivo **Open** está contraindicado en caso de:

- Problemas específicos con la articulación Temporo-Mandibola (ATM)
- Elementos dentales con mayor movilidad de carácter periodontal
- Gingivitis

5
OPEN

Los dispositivos **Open** vienen en cinco tamaños.

Se distinguen de otros dispositivos, y entre ellos, a través de acrónimos colocados en la parte delantera derecha de la brida inferior.




Open



casì clinici Dr. F. Cardarelli

DISPOSITIVO INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE MALOCLUSIONES ESQUELÉTICAS

OTROS DISPOSITIVOS AMCOP

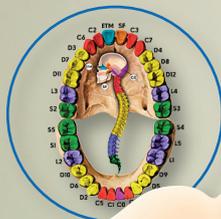

BIO-ACTIVATOR



INTEGRAL PLUS

PREGUNTE A SU DENTISTA

SELLO DE STUDIO

AMCOP®

ortodonzia
M
GRUPPO
MICERIUM

ELASTODONTIC®
therapy