

OBRACE

ATTACCHI AUTOLEGANTI PASSIVI

Incredibile comfort grazie alla superficie emisferica

OBRACE è la soluzione ortodontica rivoluzionaria sul mercato

Il profilo arrotondato e compatto, senza sporgenze, rende l'attacco autolegante OBrace igienico ed estremamente confortevole per il paziente. La superficie curva e liscia ha una funzione autopulente che impedisce l'accumulo di residui di cibo, migliorando la salute parodontale. Unico nel suo genere, rispetto ai brackets tradizionali, riduce le irritazioni della mucosa.

Safe lock

Chiusura sicura grazie ad un meccanismo unico che consente l'apertura e la chiusura della clip senza rischio di deformazione

Foro di apertura

Sistema di apertura semplificato per ridurre i tempi di trattamento alla poltrona

Profilo ultrapiatto

e larghezza implementata per un maggior controllo della rotazione

Materiale Premium

in acciaio inossidabile di altissima qualità, e superficie a specchio ($0,005 \mu\text{m}$) per la massima scorrevolezza del filo all'interno dello slot

Asse del dente

chiaramente identificabile per un più semplice e preciso posizionamento dell'attacco

Basetta



- Fabbricata in tecnica MIM per una elevata adesione sul dente
- Numerata per una più facile identificazione dell'attacco

Apertura



Spingere verso il basso con un qualsiasi strumento a punta

Chiusura

È sufficiente una leggera pressione con le dita

Dispersione della forza

La superficie semi-sferica porta ad una dispersione della forza riducendone a 1/20 il suo impatto sul bracket e, quindi, la percentuale di distacchi



OBrace con foro filettato

Il foro è opzionale e ha una tolleranza di solo 0.001 mm. Può essere usato in combinazione con due ganci differenti:

- il primo funge da gancio mantenendo l'attacco passivo
- il secondo consente di comprimere l'arco, rendendo l'attacco attivo, aumentandone l'ancoraggio



Guida colorata

La guida funge da altimetro e garantisce un posizionamento accurato essendo parallelo all'asse del dente e bordo incisale




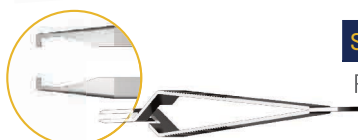
OBRACE

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+12	+5	3,9	010101128		010101135
Laterale	+8	+9	3,2	010101129		010101136
Canino con gancio	-2	+13	3,4	010101130		010101137
1° Premolare	-7	0	3,2	010101131		010101138
2° Premolare	-7	0	3,2	010101132		010101139

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	-1	2	2,9	010101149		010101142
Laterale	-1	2	2,9	010101150		010101143
Canino con gancio	-11	+7	3,2	010101151		010101144
1° Premolare	-17	-1	3,1	010101152		010101145
2° Premolare	-22	-1	3,1	010101153		010101146

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3	01010252
	Ricambi 1 pz	



STRUMENTO OBRACE

Per il posizionamento dei brackets

010101096




COMING SOON

TECNICA DAMON .022 - STANDARD

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+17	+5	3,9	1352-0101321		1352-0101323
Laterale	+10	+9	3,2	1352-0101325		1352-0101327
Canino con gancio	-2	+13	3,4	1352-0101122		1352-0101123
1° Premolare	-7	0	3,2	1351-0101236		1351-0101244
2° Premolare	-7	0	3,2	1351-0101237		1351-0101245

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	-6	0	2,9	1352-0101333		1352-0101371
Laterale	-6	0	2,9	1352-0101370		1352-0101372
Canino con gancio	0	+3	3,2	1352-0101334		1352-0101336
1° Premolare	-12	+2	3,1	1352-0101240		1352-0101242
2° Premolare	-17	+2	3,1	1352-0101241		1352-0101243

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3	1312-0101279
	Ricambi 1 pz	


COMING SOON

TECNICA DAMON .022 - HIGH TORQUE

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+22	+5	3,9	1351-0101322		1351-0101324
Laterale	+13	+9	3,2	1351-0101326		1351-0101328
Canino con gancio	+7	+11	3,4	1351-0101330		1351-0101332
1° Premolare	-7	0	3,2	1351-0101236		1351-0101244
2° Premolare	-7	0	3,2	1351-0101237		1351-0101245

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	-1	+2	2,9	1351-0101118		1351-0101120
Laterale	-1	+2	2,9	1351-0101119		1351-0101121
Canino con gancio	+13	+5	3,2	1351-0101335		1351-0101337
1° Premolare	-10	+2	3,1	1351-0101240		1351-0101242
2° Premolare	-15	+2	3,1	1351-0101241		1351-0101243

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3	1311-0101280
	Ricambi 1 pz	




TECNICA DAMON .022 - LOW TORQUE

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+12	+5	3,9	1353-0101246		1353-0101248
Laterale		+8	+9	3,2	1353-0101247		1353-0101249
Canino	con gancio	-7	+11	3,4	1353-0101329		1353-0101331
1° Premolare		-7	0	3,2	1351-0101236		1351-0101244
2° Premolare		-7	0	3,2	1351-0101237		1351-0101245

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		-6	0	2,9	1353-0101333		1353-0101371
Laterale		-6	0	2,9	1353-0101370		1353-0101372
Canino	con gancio	-6	+3	3,2	1353-0101124		1353-0101125
1° Premolare		-17	0	3,1	1353-0101373		1353-0101374
2° Premolare		-22	0	3,1	1353-0101338		1353-0101339

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3	1313-0101278
	Ricambi 1 pz	

