



# PINNAKER

T U B I B U C C A L I



# La migliore scelta clinica per il comfort ottimale del paziente

---

Il tubo buccale a profilo basso SPINNAKER è un prodotto altamente innovativo, studiato per assicurare i massimi livelli di estetica e comfort.

I tubi SPINNAKER sono costruiti con tecnologia MIM e realizzati per garantire la massima funzionalità dal punto di vista clinico.



### Linea guida

mesio-distale parallela al piano oclusale per facilitare il posizionamento

### Gancio

parallelo alla base in modo da migliorare il comfort del paziente, semplificare il bonding del tubo e ridurre le interferenze oclusali

### Estensione distale

consente di applicare sul molare una seconda forza elastica

### Entrata a imbuto

per facilitare l'inserimento degli archi da qualsiasi angolazione


### Guide laterali

Queste due guide, oclusale e gengivale, aiutano a prendere e posizionare il tubo in maniera sicura, semplice e precisa

### Profilo basso

Design elegante e confortevole per il paziente

I MOLARE

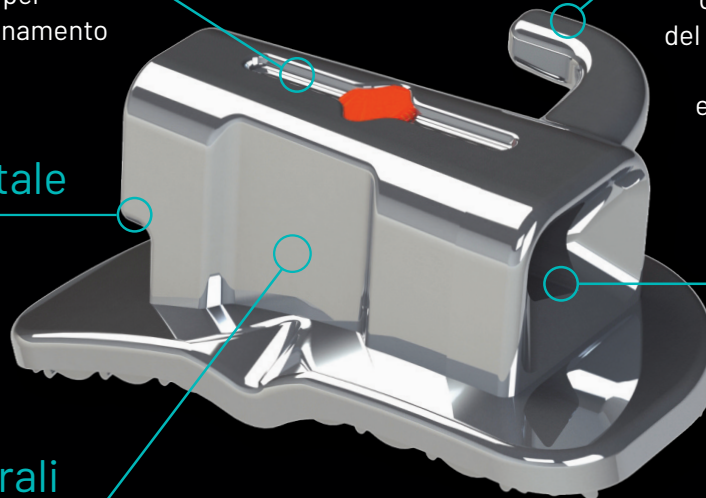

II MOLARE




## Ottima ritenzione

Base retinata (80 gauge)  
per una tenuta ideale

## Dimensioni


La bassetta è ampia sui primi molari  
per garantire la maggior adesione  
e piccola sui secondi molari  
per un più facile posizionamento

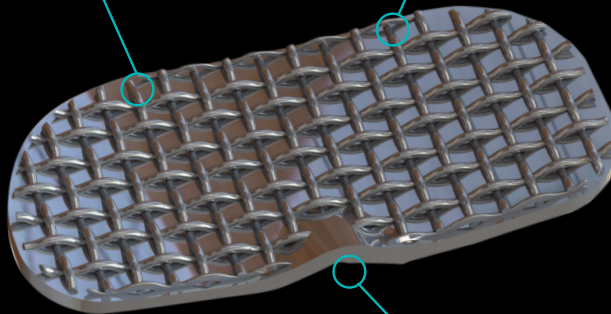


## Eccezionale adattabilità

La scanalatura e la forma della bassetta  
assicurano ai tubi SPINNAKER  
straordinaria precisione  
e forza ritentiva

Le dimensioni dei tubi per I e II molare sono state studiate  
per renderli i più confortevoli e funzionali possibili

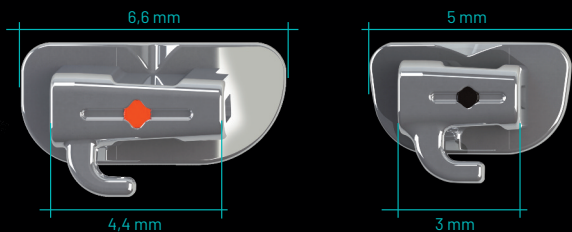


## Doppio rettangolare

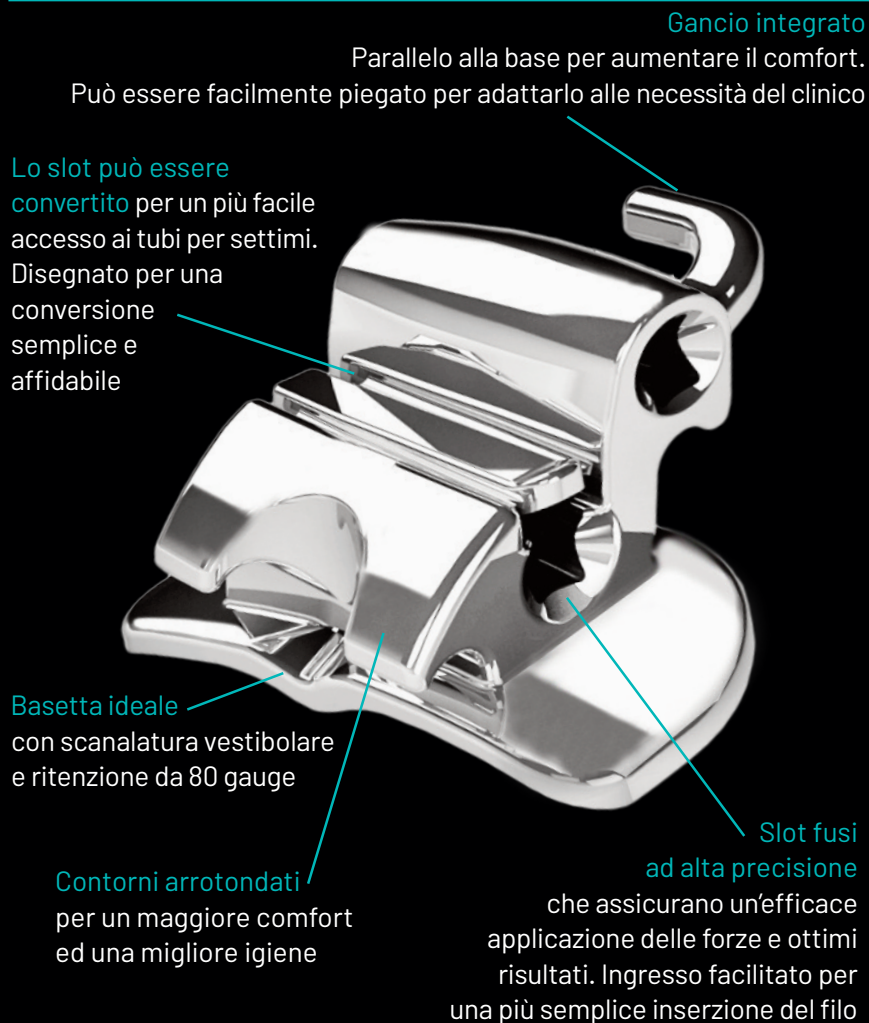

## Singolo



## Doppio tondo / rettangolare

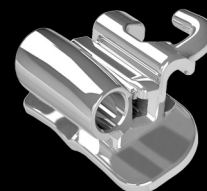

## Triplo



**SPINNAKER**  
TUBI BUCCALI



Micerium S.p.A.  
Via G. Marconi, 83  
16036 Avegno (GE) Italy  
Tel. 0185 7887 850  
ortho@micerium.it  
www.micerium.it