

MO MICERIUM
ORTHODONTICS

MISTRAL K
ATTACCHI AUTOLEGANTI

ortodonzia
M
GRUPPO
MICERIUM

Ottimo controllo rotazionale e resistenza eccellente

L'attacco autolegante interattivo MISTRAL K, disponibile sia in metallo che ceramica, è stato progettato e realizzato con un'ingegneria di precisione micrometrica e con caratteristiche accurate uniche.

MISTRAL K consente ai denti di muoversi esattamente come previsto dall'ortodontista. La tecnologia MIM del metallo e la lavorazione precisa consentono di realizzare brackets in metallo con frizione ridotta. disponibile metallico o estetico.



MISTRAL K

ATTACCHI AUTOLEGANTI

Gancio a palla

parallelo alla base per un maggior comfort del paziente

Sistema di apertura

Possibilità di aprire la clip sia dal lato gengivale che dal foro occlusale

Ingresso arrotondato

dello slot riduce l'attrito dovuto al contatto col filo

Spessore della clip

ottimizzato per evitare deformazioni e aumentare la pressione del filo sulla base dello slot

Frizione ridotta

grazie alla levigatura accurata e al trattamento di superficie dello slot

Bordo arrotondato

che aumenta il comfort del paziente durante il trattamento ortodontico

Profilo basso

Il design e il profilo più basso assicurano un trattamento ortodontico accurato e comfort al paziente



MISTRAL KLEAR

ATTACCHI AUTOLEGANTI

Bordo arrotondato

Assieme al profilo basso aumenta il comfort del paziente durante il trattamento ortodontico

Gancio a palla

Parallelo alla base per un maggior comfort del paziente

Posizionamento accurato

grazie alla linguetta in elastomero colorata, priva di lattice, parallela al bordo incisale del dente

Sistema di apertura

Possibilità di aprire la clip sia dal lato gengivale che dal foro occlusale

Trattamento di superficie

speciale su corpo e ganci per rinforzarli

Slot liscio


Frizione bassa grazie al trattamento di superficie

Spessore della clip

ottimizzato per evitare deformazioni

Corpo traslucido


estetico che si abbina al colore del dente

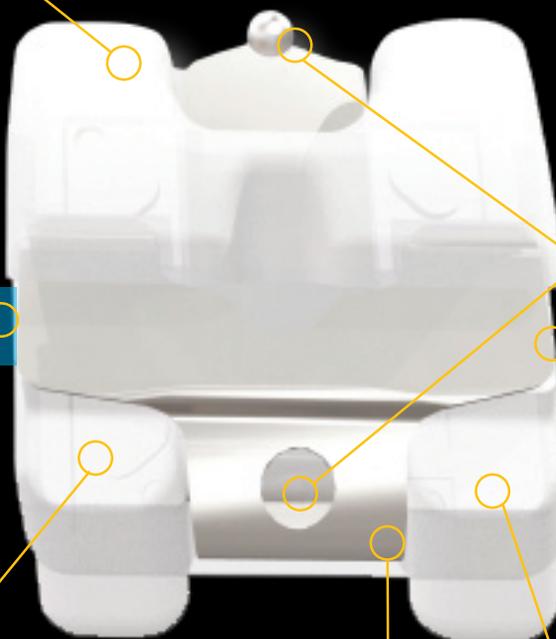

MISTRAL K

ATTACCHI AUTOLEGANTI

MISTRAL K

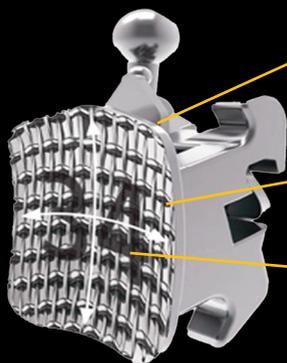


Sagoma della basetta ideale per un adattamento accurato

Ritenzione a 80 Gauge, basetta angolata a 45°

Marcatura al laser per una identificazione permanente dell'attacco

MISTRAL KLEAR

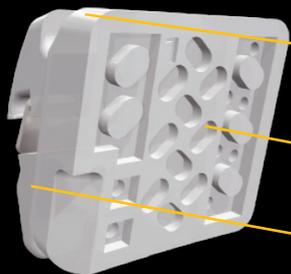

Superficie estesa per aumentare la ritenzione

La base segue la curva del dente

Scanalatura laterale per facilitare il debonding dell'attacco


Sequenza fili



Fase passiva



Fase Interattiva

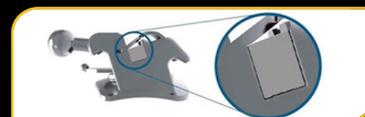

Fase Attiva

Apertura clip

Apertura primaria



Apertura secondaria





MISTRAL

ATTACCO AUTOLEGANTE



Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83
16036 Avegno (GE) Italy
Tel. 0185 7887 850
ortho@micerium.it
www.micerium.it