

BIO BIO-ACTIVADORES • CLASE I

Se utilizan en las desarmonías esqueléticas basales responsables de déficits oclusales horizontales, como las insuficiencias transversales, o verticales, como las mordidas abiertas o profundas, cuando no existen alteraciones dentarias de segunda o tercera clase.




MODELO S

Forma adecuada para una conformación craneal más ovalada y normal con arcos dentales normalmente redondeados.
Índice craneal: mesocéfalo



MODELO ØS

Forma adecuada para una conformación craneal simil-escuadrada, que caracteriza una cara con rasgos pronunciados, prominencias frontales, barbilla cuadrada con arcos dentales de forma escuadrada.
Índice craneal: mesocéfalo

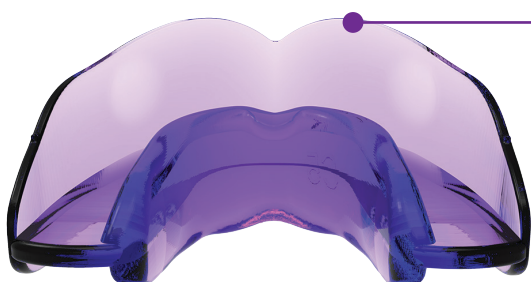

MODELO C

Forma adecuada para una conformación craneal en expansión con arcos dentales anchos y redondos con paladar bajo, típico de un contorno de cara también redondeado, en sujetos brevilíneos.
Índice craneal: braquicéfalo



MODELO F

Forma adecuada para una conformación craneal en extensión con paladar estrecho y alto y arcos dentales ojivales, frecuente en sujetos esbeltos con contorno facial oblongo.
Índice craneal: dolicocefalo

BIO BIO-ACTIVADORES • CLASE I



Descripción de los dispositivos de Clase I según la forma de la arcada del paciente
Esquema del Dr. Filippo Cardarelli

INDICACIONES

- Utilizado en dentición temporal, mixta y permanente;
- Reorganiza el sistema neuromuscular a través de una verdadera gimnasia garantizada por el efecto elástico del dispositivo;
- Corrige y armoniza las diferentes desviaciones de los arcos con consecuente mejora del sistema cráneo-cervico-mandibular;
- Desbloquea la oclusión, balancea las ATM y corrige las líneas medianas;
- Corrige los malos hábitos, colocando la lengua en postura correcta al lugar palatino y mejorando la deglución y la respiración nasal en los respiradores orales;
- Determina una prealineación de los dientes;
- Elimina las interferencias de la lengua y de los músculos orbiculares disfuncionales en los dientes;
- Adecuado para la succión del pulgar;
- Adecuado en el bruxismo y ronquido nocturno;
- Adecuado para mordidas cruzadas bilaterales y monolaterales;
- Indicado para problemas musculo-tensivos como dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, dolores cervicales, ecc..
- Indicado para las expansiones de los arcos dentales;
- Indicado también como restricción y para el tratamiento de arcos en fase de recidiva después del tratamiento con multibrakets.

MEDIDAS Y CÓDIGOS

MODELO		1/45 mm	2/50 mm	3/55 mm	4/60 mm	5/65 mm
F	BASIC	-	-	BIO-BF3	BIO-BF4	BIO-BF5
F	INTEGRAL	BIO-F1	BIO-F2	BIO-F3	BIO-F4	BIO-F5
S	BASIC	BIO-BS1	BIO-BS2	BIO-BS3	BIO-BS4	BIO-BS5
S	INTEGRAL	BIO-S1	BIO-S2	BIO-S3	BIO-S4	BIO-S5
ØS	BASIC	BIO-BØS1	BIO-BØS2	BIO-BØS3	BIO-BØS4	BIO-BØS5
ØS	INTEGRAL	BIO-ØS1	BIO-ØS2	BIO-ØS3	BIO-ØS4	BIO-ØS5
C	BASIC	-	-	BIO-BC3	BIO-BC4	BIO-BC5
C	INTEGRAL	BIO-C1	BIO-C2	BIO-C3	BIO-C4	BIO-C5

PLANOS OCLUSALES

INTEGRAL Adecuado para una acción más específicamente de carácter ortopédico-osteopático para el tratamiento de las alteraciones de las curvas oclusales como la mordida abierta anterior e/o lateral y para un correcto equilibrio de los arcos dentales.

BASIC Adecuado para el aumento de la dimensión vertical, para la remodelación de las crestas alveolares, en cuanto equipado de un engrosamiento del plano oclusal en la zona anterior.

