

BIO BIO-ACTIVADORES ESPECÍFICOS • ELASTOOSAS

ELASTOOSAS
by amcop




INDICACIONES

El aparato para los ronquidos nocturnos, **ELASTOOSAS**, consta de dos férulas oclusales unidas entre sí por una guía oclusal deslizante y retráctil, de forma que se compone un aparato de tipo monobloque adecuado para contener los dientes de la arcada dental superior e inferior en su totalidad. El aparato está diseñado con una guía oclusal adecuada para contener los diferentes tipos de forma de arco. Pueden distinguirse entre sí por los diferentes colores y abreviaturas que aparecen en la parte delantera derecha de la brida inferior. Los principales elementos que componen el dispositivo, para que se consiga la acción deseada, se refieren, en primer lugar, a la conformación de una guía de referencia de la arcada inferior más adelantada (saliente) de lo normal, y a un plano de oclusión adecuadamente elevado para acompañar una conformación particular de tipo rampa, que se extiende por todo el perímetro de las pestañas linguales inferiores, teniendo la función específica de un verdadero elevador lingual apoyado en un repere (Botón) adecuado para el estímulo (Input) de la propia lengua en la zona palatina, zona retroincisiva (Punto Lingual). Estos elementos son generalmente decisivos para la recuperación de una correcta respiración nasal, ya que permiten liberar aún más la zona faríngea.

ELASTOOSAS* es un nuevo dispositivo elastodóntico de la gama de Bio Bio-Activadores de A.M.C.O.P. Está fabricado con material médico termoe lástico y tiene como objetivo despejar las vías respiratorias, a través de una acción funcional específica, reduciendo así sustancialmente el ronquido. El dispositivo **ELASTOOSAS** también está indicado en caso de:

- Bruxismo (rechinar nocturno)
- Algunos problemas de tensión de naturaleza neuro-muscular
- Dolores de cabeza por tensión muscular en pacientes predisuesto.

**Se recomienda que el dispositivo sea utilizado por dentistas con formación específica en el tratamiento de problemas respiratorios en un enfoque multidisciplinar con especialistas en ORL.*

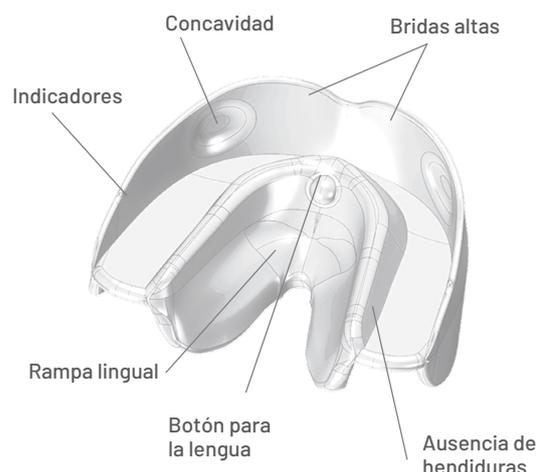

CONTRAINDICACIONES

El dispositivo **ELASTOOSAS** está contraindicado en los siguientes casos en caso de:

- Problemas articulares
Articulaciones temporomandibulares (ATM)
- Elementos dentales con movilidad acentuada de carácter periodontal
- Gingivitis completa
- Puede mover los dientes

MEDIDAS Y CÓDIGOS

MODELO	1/45 mm	2/50 mm	3/55 mm	4/60 mm	5/65 mm
OSAS	-	-	BIO-OSAS3	BIO-OSAS4	BIO-OSAS5