

# Scanner intraorale

MEDIT **i700** wireless 

## La magia con un semplice tocco

Aggiungi alle migliori performance la comodità della portabilità!!!

Wireless 60GHz sempre connesso.

Consente un completo Flusso digitale ed è abbinabile con tutti gli strumenti del presente catalogo.

- 30 casi con una sola batteria!
- 3 batterie in dotazione
- Può operare anche con il cavo di alimentazione
- Base con autospegnimento per risparmio energia
- Autocalibrante



Mascellare + Mandibolare + Occlusione  
Tempo totale di scansione  
**2 minuti**



Scansione  
fino a **30 casi**  
con 1 batteria



Fino a **90 casi**  
utilizzando  
3 batterie incluse

L'avanguardia del software Medit rende le scansioni più performanti e fruibili in ogni ambito a supporto di tutte le esigenze del Professionista.


## Funzioni di utilità

### Guida Smart alla scansione




Una guida utente rafforzata fornisce aiuto per le anomalie rilevate durante la scansione.

### Selezione Smart della scansione

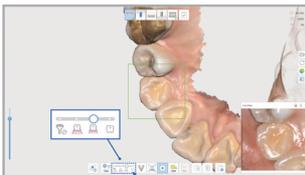


Le prestazioni di selezione A.I. migliorate facilitano il processo di scansione filtrando i tessuti molli come labbra, guance e lingua.

### Selezione Smart del colore

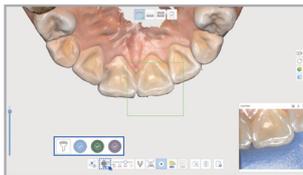

Filtra automaticamente i colori registrati, come il colore dei guanti medici, durante la scansione.

### Cucitura Smart

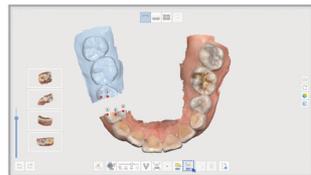

I dati di scansione frammentati sono allineati con un'area comune rilevata automaticamente.

## Funzioni di incremento qualità

### Guida Smart alle sfumature




Distingue automaticamente e suggerisce la migliore ombra corrispondente dai dati di scansione.

### Corrispondenza A.I. dello Scan Body




Assicura l'accuratezza dei dati dello Scan Body nelle aree difficili da scansionare, come la regione posteriore.

### Corrispondenza A.I. dell'abutment

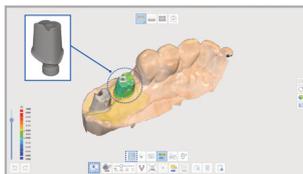

Assicura l'accuratezza dei dati nelle aree marginali in situazioni difficili di scansione.

### Modalità HD

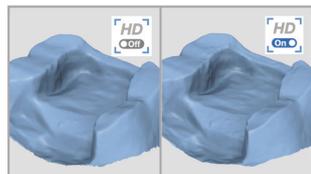

Con la modalità HD aggiornata si ottiene un'immagine di scansione più nitida nell'area marginale.

Consente un completo Flusso digitale ed è abbinabile con tutti gli strumenti del presente catalogo

# Scanner intraorale

## MEDIT i700

### Medit Plug & Scan

Medit i700 rende l'esperienza di scansione confortevole sia per il dentista che per il paziente. Con il potente hardware e il software intelligente, Medit i700 è la chiave per liberare il pieno potenziale della tua clinica.



A differenza della maggior parte degli scanner sul mercato, Medit i700 può essere collegato direttamente al PC utilizzando il cavo di alimentazione senza hub di alimentazione e cavi aggiuntivi. Questa nuova funzionalità di Medit i700 migliora la mobilità e la manutenzione.

Caratteristiche	Medit i700	Medit i700 wireless
<b>Tecnologia di scansione</b>	Frequenza degli scatti >70 FPS Tecnologia immagine Fonte di luce Led Antiappannamento Tecnologia adattiva	Tecnologia video 3D-in-motion/aquisizione 3D a colori in streaming Led Tecnologia adattiva
<b>Risoluzione</b>	Arcata completa 10.9µm ± 0.98	10.9µm ± 0.98
<b>Manipolo</b>	Dimensioni 248 x 15.9 mm Peso 245 gr	313 x 44 x 47.4 mm 328 gr
<b>Puntale</b>	Dimensioni 22.2 x 15.9 mm Angolo riflettente 45° Area shot 15 x 13 mm Autoclavabile > 100 cicli 121 °C 30 min / 134 °C 4 min	22.5 x 17.1 mm 45° 15 x 13 mm 150 cicli 121 °C 30 min / 134 °C 4 min / 135° 10 min
<b>Funzionamento</b>	Reversibilità Controllo in remoto si Disinfezione UV-C si	si si si
<b>Connessione</b>	Lunghezza cavo 2.0 mt / manipolo staccabile USB 3.1 Gen1(alimentato)	wireless USB 3.1 Gen1(alimentato)

Considerata la continua innovazione le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso

Fonte dati Medit