


Nextra Características generales

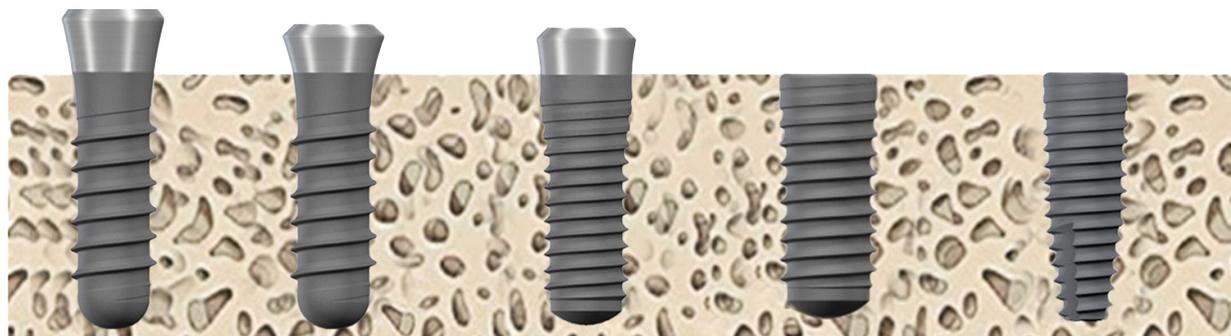


T-L STANDARD

T-L PLUS

T-L TAPERED EFFECT

B-L

B-L-T

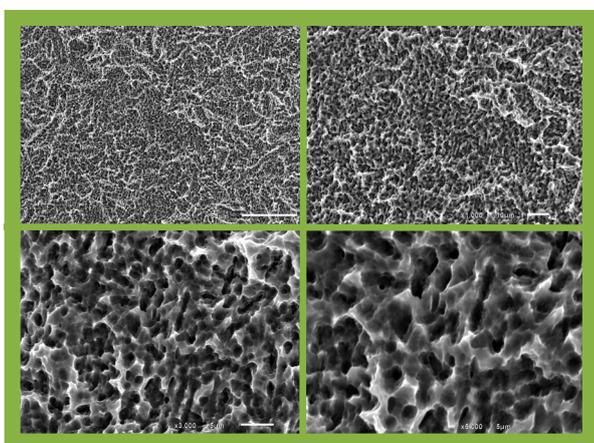

SUPERFICIE S-L-A

El tratamiento superficial S-L-A representa el Gold Standard de las superficies de los implantes.

La rugosidad variable a lo largo del cuerpo del implante en la dirección coronal-apical ($Ra_{1,0\sim 2,0} \mu m$) permite un proceso de osteointegración más rápido y reduce significativamente el tiempo necesario para la osteointegración.

TITANIO GRADO 4



Sección del cuello

- Altura reducida de 1,8 mm para su mejor estética
- Altura disponible 2,8 mm.

Espacio entre las espiras

- 0,8 mm.
- El diseño de las espiras favorece la estabilidad primaria.

Platform switching



Porción apical

- Buen rendimiento autorroscante, facilidad de cambiar la dirección del implante
- Mayor estabilidad inicial en hueso trabecular poco denso.

Conexión protésica

- Conicidad morse de 15 grados
- Excelente distribución de la carga y del sellado
- Sistema antirrotación y antivuelco.

